



Kombination aus fraktionierter Mikronadel-RF-Technologie und Kryosystem



- Hautstraffung
- Lifting-Effekt
- Aknenarbenkorrektur
- Verbesserung des Hautbildes
- Faltenreduzierung

SPECIFICATION

Energy Type	Radiofrequency & Cryo
Handpiece	Needle RF handpiece Cryo handpiece
Cartridge (Tip)	10pin, 25 pin
Input power	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Dimension (WxDxH mm)	385 x 451 x 226





Combination of Fractional
Micro Needle RF Technology
and Cryo System
Recell ice!

Recell Ice ermöglicht schnellere fraktionierte Mikronadelbehandlungen durch Kryoanästhesie mit seinem Kryosystem. Das Kryosystem spart Zeit, da keine Betäubungscreme aufgetragen und deren Wirkungszeit abgewartet werden muss. Stattdessen bietet es eine sofortige Behandlung mit Kryoanästhesie. Die fraktionierte Mikronadel-RF-Technologie ist eine nicht-invasive Behandlungsform, bei der Nadeln verwendet werden. Sie ist wirksam bei der Gesichtstraffung, Faltenverbesserung und Narbenkorrektur. Die fraktionierte RF-Technologie gibt Energie direkt an die Dermis ab und sorgt so für Hautstraffung, Kollagenproduktion und Elastinregeneration

Cryo System




Temperatursensor im Handstück Der im Handstück eingebaute Temperatursensor sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur konstant gehalten wird. Die niedrigste einstellbare Temperatur beträgt -10°C. 3 Stufen der Kryo-Intensität Das Gerät verfügt über 3 verschiedene Stufen der Kryo-Intensität, die für unterschiedliche Kundenbedürfnisse geeignet sind. Das Kryosystem ermöglicht dank Kryoanästhesie eine sofortige Behandlung und bietet den Patienten gleichzeitig ein angenehmes Gefühl.

Fractional micro needle RF

BI-POLAR RF

RF-Nadel Die in die Haut eingestochene RF-Nadel gibt bipolare Energie an die Dermis ab und regt dadurch die Kollagen- und Elastinproduktion an.

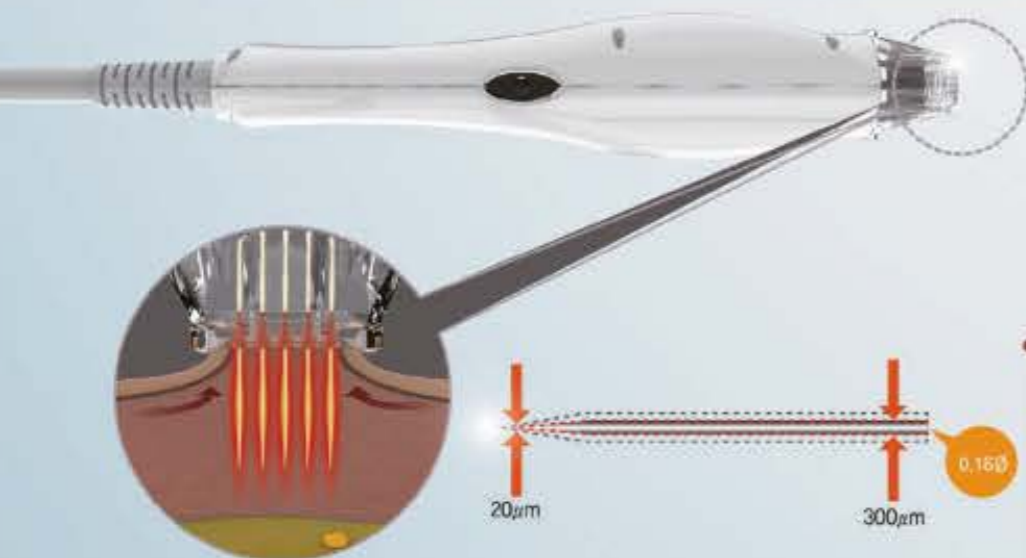

MULTI NEEDLE


Needling, die invasive physikalische Behandlung, ist wirksam bei der Korrektur von Aknenarben. Präzise Tiefenkontrolle ermöglicht die optimale Anpassung der Behandlung an unterschiedliche Hautzustände.



Fractional Micro needle RF Healing Process



3D Treatment

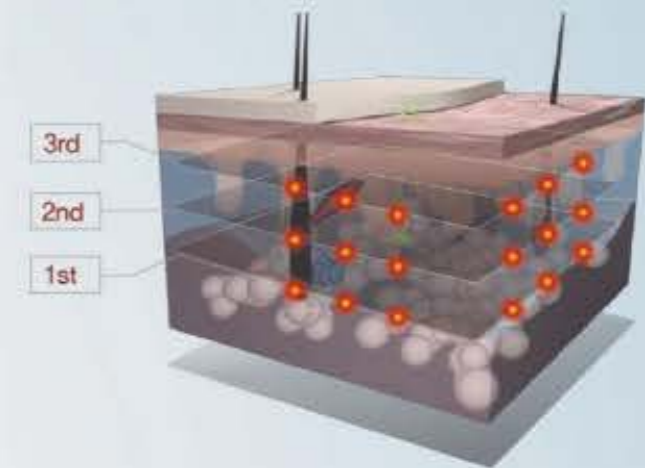

Die Behandlung kann mit 3 verschiedenen Tiefen in Epidermis und Dermis durchgeführt werden. Dabei wird in der oberen Dermis eine Thermalzone erzeugt, um die Behandlungswirkung zu maximieren.

<p>Speed</p> <ul style="list-style-type: none"> Sofortbehandlung dank Kryoanästhesie Spart Zeit durch Wegfall von Auftragen und Einwirkenlassen von Betäubungscreme. 	<p>Safety</p> <ul style="list-style-type: none"> Keine Nebenwirkungen von Betäubungscreme Hygienische Behandlung durch sterile Einwegnadeln 	<p>Accuracy</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiefe: 0,5 - 3,0 mm RF-Level: 1 - 10 Stufen Regulierbare RF-Leistung pro Nadel Saugleistung: 0-3 Stufen Kryo-Level: 1 - 3 Stufen 	<p>User Convenience</p> <ul style="list-style-type: none"> Fußschalter-/Handstückschalter-Optionen 5" Touch Screen User-Friendly UI Das ergonomisch geformte Handstück sorgt für ein angenehmes Griffgefühl auch nach längerer Behandlung
---	--	---	--

Features

- Hygienische Behandlung durch sterile Einwegnadeln
- 2 Nadelkopf-Optionen (2 Stifte / 10 Stifte)
- Gleichmäßige Behandlung des gesamten Behandlungsareals dank Vakuumtechnologie.
- Die dünne Nadel (0,160 mm) minimiert Schmerzen und verkürzt die Erholungszeit.
- Keine überlappenden RF-Nadelbereiche

